


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не давите слишком сильно на зубную щетку во время чистки зубов, во избежание срабатывания датчика нажима.
- ▲ Направляйте струю воды из насадки ирригатора только в ротовую полость. Из насадки ирригатора во время работы будет вырываться упругая струя воды, будьте осторожны.
- ▲ Устройство является предметом личной гигиены, поэтому рекомендуется не передавать другому человеку индивидуальную насадку.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Крышка резервуара для воды съемная
2. Резервуар для воды 0,6 л
3. Клапан резервуара
4. Индикатор режима работы ирригатора «Очистка».
5. Индикатор режима работы ирригатора «Массаж».
6. Регулятор:
 - нажатие на него:
 - включает ирригатор;
 - переключает между режимами работы ирригатора;
 - выключает ирригатор
 - поворот его настраивает уровень давления воды от 1 до 10
7. Отсек для шланга
8. Корпус ирригатора
9. Магнитный выступ для крепления ручки ирригатора
10. Шланг
11. Зарядная площадка зубной щетки
12. Прорезиненные ножки
13. Разъем для сетевого адаптера
14. Ручка ирригатора
15. Переключатель ручки ирригатора
16. Разъем для насадки
17. Кнопка отсоединения насадки
18. Выемка для крепления ручки ирригатора
19. Сетевой адаптер
20. Стандартная струйная насадка
21. Пародонтологическая насадка
22. Ортодонтическая насадка
23. Насадка-ложка для чистки языка
24. Насадка для массажа десен
25. Насадка назальная
26. Насадка для зубной щетки
27. Приводной вал
28. Индикатор датчика нажима на зубную щетку. Горит красным при слишком сильном нажатии на зубную щетку во время чистки
29. Корпус зубной щетки
30. Кнопка включения/выключения/переключения режимов работы зубной щетки
31. Индикатор режима работы «Очистка»
32. Индикатор режима работы «Мягкий»
33. Индикатор режима работы «Отбеливание»
34. Индикатор режима работы «Массаж»
35. Индикатор режима работы «Полировка»
36. Индикатор зарядки зубной щетки
37. Разъем для зарядки зубной щетки
38. Чехол для хранения насадок

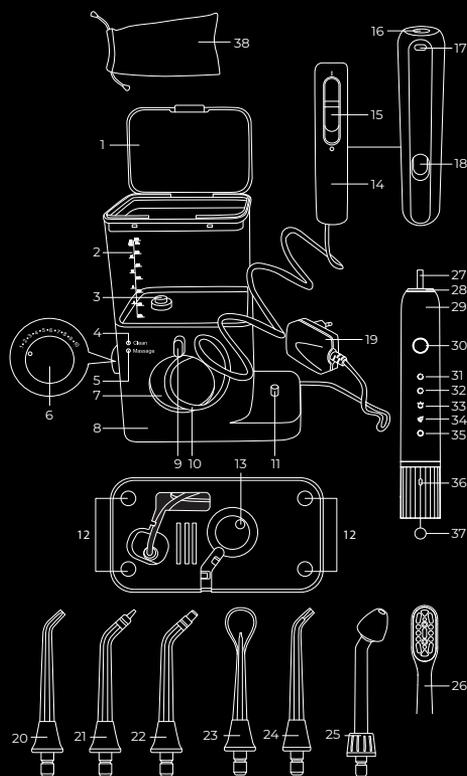

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Перед первым использованием промойте все насадки (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

Зарядка прибора

i Время зарядки прибора – около 12 ч.

Вставьте один конец сетевого адаптера в разъем для сетевого адаптера (13) и подключите сетевой адаптер к электросети. Поставьте корпус зубной щетки на зарядную площадку (11), совместив разъем (36) на щетке с выступом на площадке. Индикатор зарядки зубной щетки загорится. Когда индикатор зарядки погаснет, это означает, что аккумулятор полностью зарядился и зубная щетка готова к работе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Использование ирригатора

1. Наполните резервуар фильтрованной водой и подключите сетевой адаптер к электросети.
2. Вставьте в разъем для насадки (16) любую насадку для ирригатора.
3. Направьте насадку в раковину, чтобы настроить мощность подаваемой струи воды перед тем, как погружать насадку в ротовую полость.
4. Включите ирригатор, нажав на центр регулятора (6). Запустится последний используемый Вами режим работы ирригатора. Чтобы сменить режим работы, снова нажмите на центр регулятора.
5. Переведите переключатель (15) в положение I.
6. Поворачивая регулятор (6), выберите уровень давления воды от 1 до 10.
7. Переведите переключатель (15) в положение O.
8. Погрузите насадку в ротовую полость и снова переведите переключатель (15) в положение I.
9. Держите прибор вертикально, направляйте струю воды к очищаемой части и перемещайте насадку.
10. Через 2 мин. устройство отключится автоматически, либо Вы можете выключить его самостоятельно, нажав на центр регулятора (6).
11. Переведите переключатель (15) в положение O.
12. Разберите ирригатор и очистите его.

Использование зубной щетки

1. Зарядите прибор, если он разряжен, и прикрепите насадку, надев ее на приводной вал до упора.
 2. Нанесите на насадку средство для чистки зубов.
 3. Нажмите на кнопку (30), чтобы включить устройство. Устройство включится на том режиме, на котором Вы работали в прошлый раз.
 4. Продолжайте нажимать на кнопку (30), если хотите изменить режим работы.
 5. Поместите насадку в ротовую полость.
 6. Перемещайте насадку вдоль зубов. Для удобства поделите ротовую полость на 4 участка и уделяйте каждому участку 30 секунд.
- i** Устройство оснащено датчиком нажима, который предупреждает о слишком сильном нажатии на зубную щетку. Сильное нажатие может повредить эмаль или десны. При сильном нажатии на зубную щетку во время чистки зубов сработает датчик нажима, устройство издаст звуковой сигнал и индикатор датчика нажима (28) загорится красным цветом.
7. Зубная щетка автоматически выключится через 2 мин. или Вы можете выключить ее вручную, нажав на кнопку (30).
 8. Очистите зубную щетку и разберите.

i Для очистки ротовой полости используйте только теплую фильтрованную воду! Каждые 30 сек. устройство будет делать паузу. Это сигнал о том, что необходимо сменить участок очистки.

Таблица режимов работы ирригатора

Режим	Параметры режима	Рекомендации
Режим «Очистка» Clean	вода из насадки подается ровной струей	для очистки межзубного пространства и труднодоступных мест в ротовой полости точно направленной струей воды
Режим «Массаж» Massage	вода из насадки подается пульсирующей струей	для очистки межзубного пространства, труднодоступных мест в ротовой полости, массажа десен пульсирующей струей воды

Таблица режимов работы зубной щетки

Режим работы	Рекомендации
«Очистка» 	используется для ежедневной чистки зубов
«Мягкий» 	используется для чистки чувствительных зубов
«Отбеливание» 	режим для эффективного удаления зубного налета
«Массаж» 	режим работы с пульсацией для глубокой чистки зубов и массажа десен
«Полировка» 	дополнение к основной чистке для максимальной гладкости зубов

УХОД И ОЧИСТКА

STOP Никогда не используйте для очистки агрессивные средства и воду горячее 50 °C!

Не промывайте корпус ирригатора, и корпус зубной щетки под водой. Используйте для их очистки только влажную, а затем сухую ткань.

i Меняйте насадку для зубной щетки не реже 1 раза в 3 месяца, а насадки ирригатора – не реже одного раза в 6 месяцев.

Запустите ирригатор без воды, чтобы удалить остатки воды из шланга. Регулятором (6) выберите максимальный уровень давления воды 10 и нажмите на центр регулятора, чтобы включить прибор. Переведите переключатель (15) в положение I, чтобы вышли остатки воды.

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)