


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не располагайте посторонние предметы (в первую очередь металлические) на зарядной станции, когда она подключена к источнику питания.
- ▲ Не используйте устройство без насадок.
- ▲ Направляйте струю воды из стандартной струйной насадки только в ротовую полость. Из устройства во время работы будет вырываться упругая струя воды, будьте осторожны.
- ▲ Устройство является предметом личной гигиены, поэтому рекомендуется не передавать другому человеку индивидуальную насадку.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

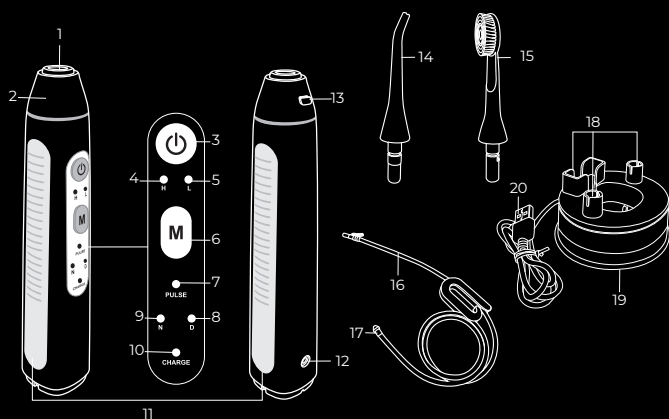

1. Отсек для насадки
2. Ирригатор
3. Кнопка включения/выключения
4. Индикатор сильного режима работы **H**
5. Индикатор мягкого режима работы **L**
6. Кнопки параметров работы
 - короткое нажатие переключает между режимами работы;
 - длительное нажатие в течение 3 сек. переключает между таймерами
7. Индикатор импульсного режима работы **PULSE**
8. Индикатор длительного таймера **D** (150 сек.)
9. Индикатор короткого таймера **N** (60 сек.)
10. Индикатор заряда аккумулятора
11. Прорезиненные бока
12. Отверстие для присоединения шланга с клипсой
13. Кнопка отсоединения насадки
14. Стандартная струйная насадка
15. Насадка для зубной щетки
16. Шланг с клипсой
17. Фильтр шланга
18. Отсеки для аксессуаров
19. Зарядная станция
20. Кабель USB

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

Перед первым использованием промойте все насадки и шланг (см. раздел «УХОД И ОЧИСТКА»).

Зарядка прибора

Время зарядки прибора – около 6-8 ч.

Подсоедините зарядную станцию к USB-разъему источника питания. В качестве источника питания используйте включенный компьютер или сетевой адаптер, подсоединенный к электророзетке, и поставьте на станцию ирригатор. Когда аккумулятор зарядится, индикатор (10) загорится зеленым цветом.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Использование прибора со стандартной струйной насадкой

1. Вставьте в отсек для насадки (1) стандартную струйную насадку (14).
2. Вставьте один конец шланга в отверстие для шланга (12), другой конец шланга с фильтром (17) – в емкость с водой и закрепите шланг на емкости клипсой.
3. Нажимая на кнопку **M**, выберите режим работы. Индикатор выбранного режима будет гореть зеленым цветом.
4. Если нужно сменить таймер, нажмите и удерживайте кнопку **M**. Индикатор выбранного таймера будет гореть синим цветом.
5. Вставьте насадку в ротовую полость и включите прибор, нажав кнопку **U**.
6. Держите прибор вертикально и направляйте струю воды к зубам или к деснам.
7. Когда Вы закончили использовать прибор, нажмите на кнопку **U**, чтобы выключить.
8. Разберите и очистите прибор.

Использование прибора с насадкой для зубной щетки

1. Вставьте в отсек для насадки (1) насадку для зубной щетки (15) до щелчка.
- i** Вставляйте насадку ровно, чтобы она плотно «села» в отсеке, в противном случае зубная щетка работать не будет.
2. Нажимая на кнопку **M**, выберите режим работы. Индикатор выбранного режима будет гореть зеленым цветом.
3. Если нужно сменить таймер, нажмите и удерживайте кнопку **M**. Индикатор выбранного таймера будет гореть синим цветом.
4. Перемещайте насадку вдоль зубов, совершая круговые движения.
5. Когда Вы закончили использовать прибор, нажмите на кнопку **U**, чтобы выключить.
6. Разберите и очистите прибор.
- i** Каждые 30 сек. устройство будет прерывать работу на 1 сек. Это сигнал о том, что необходимо сменить участок очистки.

Таблица режимов работы

Режим	Параметры режима	Рекомендации
Сильный режим (H)	Интенсивная струя воды из стандартной струйной насадки и высокая скорость движения насадки для зубной щетки	Для очистки межзубного пространства стандартной струйной насадкой и для тщательной чистки зубов насадкой для зубной щетки
Мягкий режим (L)	Менее интенсивная струя воды из стандартной струйной насадки и низкая скорость движения насадки для зубной щетки	Для мягкой очистки межзубного пространства и труднодоступных мест в ротовой полости стандартной струйной насадкой и чистки чувствительных зубов насадкой для зубной щетки
Импульсный режим (PULSE)	Пульсирующая струя воды из стандартной струйной насадки и пульсирующие движения насадки для зубной щетки	Рекомендуется для массажа десен пульсирующей струей воды из стандартной струйной насадки и насадкой для зубной щетки

Таблица таймеров

Таймер	Время работы	Рекомендации
Короткий таймер N	60 секунд	Для нормальной очистки
Длительный таймер D	150 секунд	Для глубокой очистки

УХОД И ОЧИСТКА

- STOP** **Никогда не используйте для очистки агрессивные средства и воду горячее 50 °C!**
Не промывайте зарядную станцию под водой.
Протирайте коннекторы зарядки ТОЛЬКО сухой тканью.
- i** Меняйте насадку для зубной щетки не реже 1 раза в 3 месяца, а стандартную струйную насадку – не реже одного раза в 6 месяцев.
Замените стандартную струйную насадку, если сопло насадки деформировано.
- i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)