
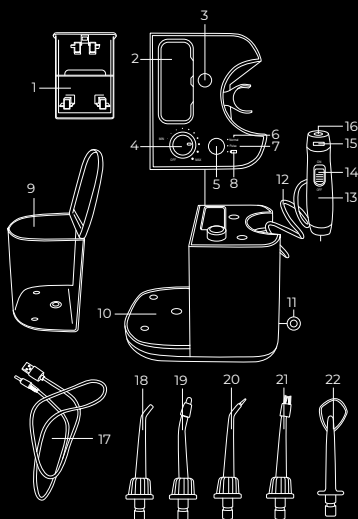


### ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Устройство не работает, когда оно подключено к источнику питания и аккумулятор заряжается.
- ▲ Направляйте струю воды из насадки ирригатора только в ротовую полость.
- ▲ Перед использованием прибора проконсультируйтесь со стоматологом.
- ▲ Меняйте насадку для ирригатора не реже одного раза в 6 месяцев.

### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Контейнер для стерилизации насадок
2. Стерилизатор
3. Кнопка извлечения контейнера для стерилизации
4. Регулятор уровня давления воды
5. Кнопка выбора режима работы
6. Индикатор нормального режима работы **Normal**
7. Индикатор импульсного режима работы **Pulse**
8. Индикатор заряда 
9. Резервуар для воды
10. Платформа резервуара
11. Разъем для кабеля DC 3,5 × 1,35 мм
12. Шланг
13. Ручка ирригатора
14. Переключатель ручки ирригатора
15. Кнопка отсоединения насадки
16. Отверстие для насадки
17. Кабель USB/DC 3,5 × 1,35 мм
18. Стандартная струйная насадка
19. Ортодонтическая насадка
20. Пародонтологическая насадка
21. Насадка для чистки имплантов и коронок
22. Насадка-ложка для чистки языка



### Насадки

	Стандартная струйная насадка	подходит для ежедневной гигиены за ротовую полость
	Пародонтологическая насадка	помогает в очищении десневого края и десневых карманов, очищает пространство под мостами и протезами
	Ортодонтическая насадка	рекомендуется для использования людям с брекетами, мостами, коронками, винирами
	Насадка-ложка для чистки языка	подходит для удаления налета с языка, поверхности щек и нёба
	Насадка для чистки имплантов и коронок	насадка с щетинками облегчает уход за зубными имплантами, винирами, коронками, мостами

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Зарядите прибор (около 1 ч).
2. Наполните резервуар фильтрованной водой, вставьте насадку в отверстие для насадки (16) до щелчка.
3. Погрузите насадку в рот, переведите переключатель (14) в положение ON, чтобы открыть подачу воды.
4. Включите прибор и выберите уровень давления воды, повернув регулятор (4) в положение между отметками MIN и MAX.
5. Нажимая на кнопку выбора режима работы (5), измените режим работы при необходимости. Индикатор выбранного режима будет гореть синим цветом.
6. Также Вы можете сначала выбрать режим работы, а потом включить ирригатор и настроить давление воды.
7. Держите ручку ирригатора вертикально, перемещайте насадку вдоль зубного ряда.
8. Через 5 мин. устройство автоматически прекратит работать, после этого поверните регулятор (4) в положение OFF, чтобы окончательно выключить его.
9. Переведите переключатель (14) в положение OFF, чтобы перекрыть подачу воды.
10. Очистите ирригатор и простерилизуйте насадки.

### Таблица режимов работы ирригатора


Режим	Параметры режима	Рекомендации
Режим <b>Normal</b>	вода из насадки подается ровной струей	для очистки межзубного пространства и труднодоступных мест в ротовой полости точно направленной струей воды
Режим <b>Pulse</b>	вода из насадки подается пульсирующей струей	для очистки межзубного пространства и труднодоступных мест, а также массажа десен пульсирующей струей воды


### УХОД И ОЧИСТКА


#### Очистка ирригатора

1. Снимите резервуар для воды, вылейте остатки воды и промойте резервуар под проточной водой.
2. Переведите переключатель (14) в положение ON, чтобы вода начала поступать из насадки.
3. Запустите ирригатор без резервуара для воды, когда вода перестанет поступать из насадки, переведите переключатель (14) в положение OFF.
4. Отсоедините насадку и промойте её под проточной водой.

#### Стерилизация насадок

1. Нажмите на кнопку извлечения контейнера для стерилизации (3) и извлеките контейнер, расположите в контейнере необходимые для стерилизации насадки.
2. Вставьте контейнер обратно в стерилизатор (2) до щелчка, автоматически начнется стерилизация. Когда индикатор  прекратит мигать, процесс стерилизации завершен.

 **ВНИМАНИЕ!** Когда вставляете контейнер обратно в стерилизатор, убедитесь, что контейнер повернут насадками к кнопке извлечения контейнера (3).

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)**