


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Вы можете добавить в воду небольшое количество специализированного средства для ирригаторов.
- ▲ Перемещайте резервуар для воды только за корпус. Не держитесь за контейнер для насадок / крышку резервуара для воды (2), так как эта часть съемная не закреплена на резервуаре.
- ▲ Не используйте устройство без насадок.
- ▲ Используйте только фильтрованную воду. Направляйте струю воды из насадки ирригатора только в ротовую полость. Из насадки ирригатора во время работы будет вырываться упругая струя воды, будьте осторожны.
- ▲ Перед использованием прибора проконсультируйтесь со стоматологом.
- ▲ Если Вы используете пародонтологическую насадку, используйте давление воды не выше 5 уровня; если назальную насадку, не выше 2 уровня.
- ▲ Устройство является предметом личной гигиены, поэтому рекомендуется не передавать другому человеку индивидуальную насадку.
- ▲ Меняйте насадки не реже одного раза в 6 месяцев.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Крышка контейнера для насадок
2. Контейнер для насадок / крышка резервуара для воды
3. Резервуар для воды
4. Клапан резервуара
5. Платформа резервуара для воды
6. Магнитный держатель ручки ирригатора
7. Корпус ирригатора
8. Индикатор режима работы ирригатора **Clean** («Очистка»). Горит синим цветом, если выбран режим работы «Очистка»
9. Индикатор режима работы ирригатора **Massage** («Массаж»). Горит синим цветом, если выбран режим работы массаж
10. Регулятор уровня давления воды от 1 до 10
11. Кнопка включения / выключения / переключения режима работы
12. Прорезиненные ножки
13. Разъем для сетевого адаптера
14. Отсек для шланга
15. Шланг
16. Ручка ирригатора
17. Переключатель ручки ирригатора. Имеет два положения:
 - I – подача воды открыта;
 - O – подача воды закрыта
18. Поворотный механизм насадки
19. Разъем для насадки
20. Кнопка отсоединения насадки
21. Сетевой адаптер
22. Стандартная струйная насадка

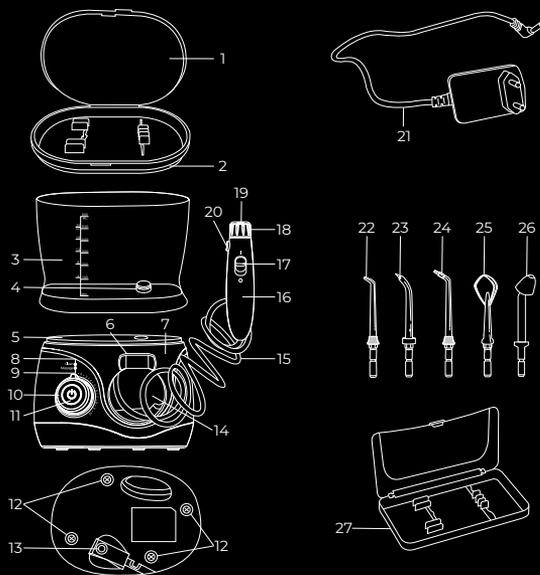


23. Пародонтологическая насадка
24. Ортодонтическая насадка
25. Насадка-ложка для чистки языка
26. Назальная насадка
27. Футляр для хранения насадок

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора. Перед первым использованием промойте все насадки.

1. Вставьте один конец сетевого адаптера в разъем для сетевого адаптера (13), расположенный на обратной стороне корпуса ирригатора, и подключите сетевой адаптер к электросети.
2. Снимите контейнер для насадок / крышку резервуара для воды (2) с резервуара, снимите резервуар с платформы (5).
3. Наполните резервуар фильтрованной водой до отметки 600 ML, установите резервуар обратно на платформу (5).
4. Установите контейнер для насадок / крышку резервуара для воды (2) на резервуар для воды.

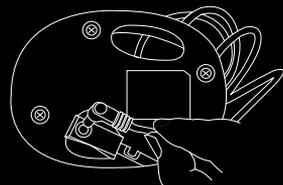

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вставьте в разъем для насадки (19) любую насадку.
2. Направьте насадку в раковину, чтобы настроить мощность воды перед тем, как погружать насадку в рот.
3. Включите ирригатор, нажав на кнопку (11). Запустится последний используемый Вами режим работы ирригатора. Чтобы сменить режим работы, снова нажмите на кнопку (11). Переведите переключатель (17) в положение **I**.
4. Регулятором (10) выберите уровень давления воды от **1** до **10**. Переведите переключатель (17) в положение **O**.
5. Погрузите насадку в ротовую полость и снова переведите переключатель (17) в положение **I**.
6. Держите прибор вертикально, направляйте струю воды к очищаемой поверхности и перемещайте насадку.
7. Через 2 мин. устройство отключится автоматически, либо Вы можете выключить его, нажав на кнопку (11).
8. Переведите переключатель (17) в положение **O**. Разберите ирригатор и очистите его.

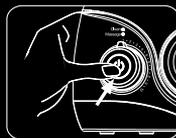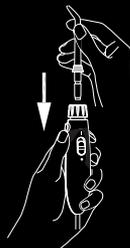

i Каждые 30 сек. устройство будет делать паузу. Это сигнал о том, что необходимо сменить участок очистки.



Таблица режимов работы ирригатора

Режим	Параметры режима	Рекомендации
Режим Clean («Очистка»)	вода из насадки подается ровной струей	для очистки межзубного пространства и труднодоступных мест в ротовой полости точно направленной струей воды
Режим Massage («Массаж»)	вода из насадки подается пульсирующей струей	для очистки межзубного пространства, труднодоступных мест в ротовой полости, массажа десен пульсирующей струей воды

УХОД И ОЧИСТКА

STOP *Никогда не используйте для очистки агрессивные средства и воду горячее 50 °C!*

1. Снимите резервуар для воды, снимите крышку (2), вылейте остатки воды, если они имеются, и промойте резервуар под проточной водой.
2. Запустите ирригатор без резервуара для воды, чтобы удалить остатки воды из шланга. Регулятором (10) выберите максимальный уровень давления воды **10** и нажмите на кнопку (11), чтобы включить прибор. Переведите переключатель (17) в положение **I**, чтобы вода начала поступать из насадки.
3. Когда вода перестанет поступать из насадки, переведите переключатель (17) в положение **O** и выключите прибор, нажав на кнопку (11).
4. Отсоедините насадку. Для этого нажмите на кнопку отсоединения насадки (20) и потяните насадку вверх.
5. Промойте насадку под проточной водой.
6. Протрите ручку ирригатора и корпус ирригатора влажной, а затем сухой тканью.
7. Храните насадки в контейнере для насадок (2) и в футляре для хранения насадок (27).

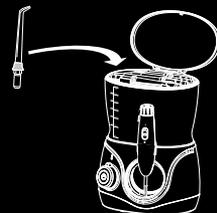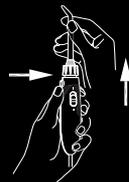

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)