


### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Отверстие для залива воды
2. Заглушка отверстия для залива воды
3. Заглушка разъема кабеля USB Type-C
4. Разъем для кабеля USB Type-C
5. Корпус ирригатора
6. Разъем для насадки
7. Кнопка отсоединения насадки
8. Кнопка включения/выключения 
9. Кнопка выбора режима работы 
10. Индикаторы режимов работы
11. Дисплей
12. Защитный кожух шланга
13. Шланг
14. Фильтр
15. Резервуар для воды
16. Крышка ирригатора
17. Кабель USB Type-C
18. Стандартная струйная насадка

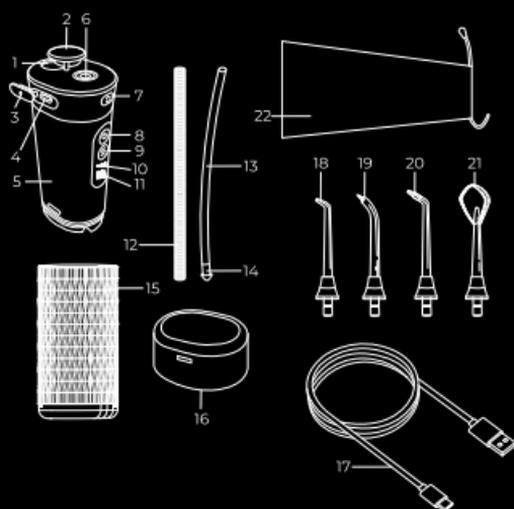

19. Пародонтологическая насадка
20. Ортодонтическая насадка
21. Насадка-ложка для чистки языка
22. Чехол для хранения насадок

### НАСАДКИ

	Стандартная струйная насадка	позволяет хорошо вымывать налет и остатки пищи из межзубных пространств и десневых борозд. Подходит для ежедневной гигиены ротовой полости
	Пародонтологическая насадка	помогает в очищении десневого края и десневых карманов, подходит для очищения пространства под мостами и протезами
	Ортодонтическая насадка	рекомендуется для использования людям с брекетами, мостами, коронками, винирами
	Насадка для чистки имплантов, коронок, виниров	подходит для удаления налета с языка, поверхностей щек и неба

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

- i** Устройство не работает, когда оно заряжается. Время зарядки прибора – около 4 ч.
1. Зарядите аккумулятор. Когда аккумулятор будет заряжен, на дисплее загорится значение 100.
  2. Снимите крышку (16) и выдвиньте корпус ирригатора из резервуара для воды.
  3. Откройте заглушку (2), налейте 150 мл воды в резервуар, закройте заглушку.
  4. Вставьте насадку в разъем (6), выберите режим кнопкой .
  5. Погрузите насадку в рот и нажмите на кнопку включения/выключения , чтобы включить ирригатор.
  6. Держите прибор вертикально, направляйте струю воды к очищаемой части и перемещайте насадку.
  7. Когда в резервуаре для воды закончится вода, нажмите на кнопку включения/выключения , чтобы выключить прибор. Если выбран режим работы «Импульсный», перестаньте нажимать на кнопку  и прибор выключится.

### Таблица режимов работы

Режим	Параметры режима	Рекомендации
Мягкий режим 	«мягкая» струя воды из насадки; автоотключение через 2 минуты	для очистки межзубного пространства и труднодоступных мест во рту точно направленной «мягкой» струей воды из насадки
Нормальный режим 	интенсивная струя воды из насадки; автоотключение через 2 минуты	для очистки межзубного пространства и труднодоступных мест во рту точно направленной «острой» струей воды из насадки
Импульсный режим 	вода из насадки подается, только пока зажата кнопка 	для очистки межзубного пространства и труднодоступных мест в ротовой полости пульсирующей струей воды из насадки
Настраиваемый режим 	настраиваемый уровень давления воды от 1 до 10; автоотключение через 2 минуты	для очистки межзубного пространства и труднодоступных мест во рту с возможностью самостоятельно выбрать уровень давления воды в соответствии со своими предпочтениями и потребностями

- i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел работы с клиентами по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)