

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- ▲ Время полной зарядки аккумулятора – около 12 ч.
- ▲ Устройство является предметом личной гигиены, поэтому рекомендуется не передавать другому человеку индивидуальную насадку.
- ▲ Никогда не используйте для очистки прибора агрессивные средства и воду горячее 50 °С.
- ▲ Не промывайте корпус зубной щетки, корпус зарядной станции и стерилизатор под водой. Используйте для их очистки только влажную, а затем сухую ткань.
- ▲ Меняйте насадку для зубной щетки не реже одного раза в 3 месяца.
- ▲ Время стерилизации – около 10 мин.
- ▲ Перед стерилизацией высушите на воздухе или протрите сухой тканью насадки. Не ставьте их в стерилизатор в мокром виде.
- ▲ В процессе стерилизации стерилизатор будет распространять характерный запах, это не является неисправностью.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. УФ-лампа
2. Дверца стерилизатора
3. Выступы для установки насадок
4. Корпус зарядной станции
5. Кабель USB
6. Зарядная станция
7. Стерилизатор
8. Индикатор типа работы ○:

 - горит – ультразвуковой тип работы;
 - не горит – звуковой тип работы


9. Индикатор режима работы «Массаж» ○○○○
10. Индикатор режима работы «Отбеливание» ○○○○
11. Индикатор режимы работы «Мягкий» ○○○○
12. Индикатор режима работы «Очистка» ○○○○
13. Кнопка выбора типа работы
14. Кнопка вкл / выкл / смены режима работы прибора
15. Корпус зубной щетки
16. Приводной вал
17. Насадка для зубной щетки

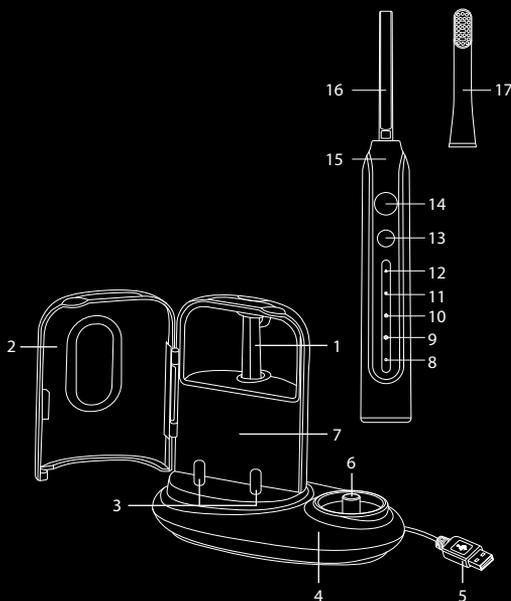

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка прибора

1. Подсоедините кабель USB к USB-разъему источника питания. В качестве источника питания Вы можете использовать включенный компьютер или сетевой адаптер (в комплект не входит), подсоединенный к электророзетке. Поставьте на зарядную станцию (6) корпус щетки. Индикаторы всех режимов начнут поочередно мигать.
2. Когда аккумулятор зубной щетки зарядится, индикаторы перестанут мигать. Устройство готово к работе.

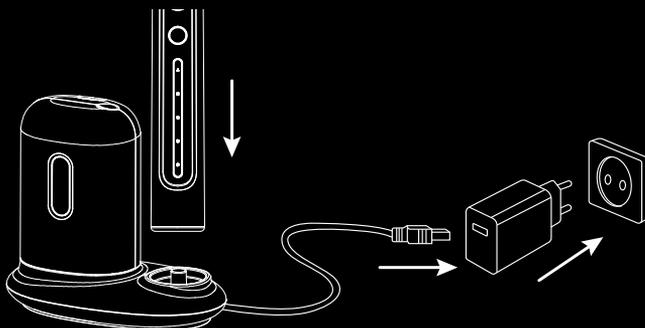

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Зарядите прибор, если он разряжен (около 12 ч), наденьте насадку на приводной вал до упора. Смойте щетину водой и нанесите на нее зубную пасту.
- i** Между насадкой и зубной щеткой останется небольшая щель.
2. Включите устройство, нажав на кнопку включения/выключения (14). Устройство включится на том же режиме работы, который Вы выбрали при прошлом использовании, индикатор выбранного режима будет гореть.
3. Продолжайте нажимать на кнопку (14), чтобы выбрать другой режим работы (см. «Таблица режимов работы»). Индикатор выбранного режима будет гореть.
- i** Возможность сменить режим одним нажатием на кнопку вкл / выкл / смены режима работы (14) будет доступна около 3 сек. После этого времени при нажатии на кнопку (14) устройство выключится.
4. Нажимайте на кнопку выбора типа работы зубной щетки (13), чтобы выбрать тип работы. Индикатор типа работы загорится, если выбран ультразвуковой тип работы, или не будет гореть, если выбран звуковой тип работы.
5. Поместите насадку для зубной щетки в ротовую полость. Перемещайте насадку вдоль зубов. Для удобства поделите ротовую полость на 4 участка и уделяйте каждому участку 30 секунд. Держите зубную щетку под углом 45° для тщательной очистки зубов.
- i** Каждые 30 сек. устройство будет прерывать работу на 1 сек. Это сигнал о том, что необходимо сменить участок очистки.
6. Зубная щетка автоматически выключится через 2 мин. или Вы можете выключить ее вручную, нажав на кнопку (14). Очистите зубную щетку.

Таблица режимов работы

Режим работы	Рекомендации
«Очистка» 	используется для ежедневной чистки зубов
«Мягкий» 	используется для чистки чувствительных зубов
«Отбеливание» 	мощный режим для эффективного удаления зубного налета. Рекомендуется людям, часто употребляющим черный кофе и чай
«Массаж» 	режим работы с пульсацией для глубокой чистки зубов и массажа десен
Ультразвуковой тип работы 	для ежедневного глубокого очищения от зубного налета. Ультразвук проникает в труднодоступные места, очищая от налета межзубные промежутки, брекетки и другие конструкции
Звуковой тип работы 	при этом типе работы щетинки движутся вверх-вниз, сметая налет от десны к краю зуба, оказывают профилактику образования камней


УХОД И ОЧИСТКА

Очистка зубной щетки

1. После завершения использования зубной щетки переверните ее насадкой вниз и промойте насадку под проточной водой или снимите насадку с приводного вала и промойте отдельно.
2. Протрите корпус зубной щетки сначала влажной, а затем сухой тканью. Протрите приводной вал сухой тканью.
3. Высушите насадку для зубной щетки на воздухе или протрите ее сухой тканью.

Стерилизация насадок

1. Подсоедините кабель USB к USB-разъему источника питания.
2. Откройте дверцу стерилизатора. Поставьте насадки для зубной щетки на выступы (3).
3. Закройте дверцу стерилизатора. УФ-лампа загорится, начнется процесс стерилизации.
4. Стерилизация автоматически завершится через 10 минут. Вы можете прервать ее в любой момент, открыв дверцу стерилизатора, но после закрытия дверцы стерилизация начнется заново. Через 10 минут стерилизация завершится и УФ-лампа погаснет.

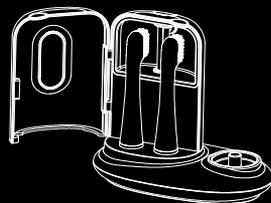

- i** Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)