

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



- ▲ Время полной зарядки аккумулятора – около 16 ч.
- ▲ Устройство является предметом личной гигиены, поэтому рекомендуется не передавать другому человеку индивидуальную насадку.
- ▲ Никогда не используйте для очистки прибора агрессивные средства и воду горячее 50 °С.
- ▲ Не промывайте корпус зубной щетки и зарядную станцию под водой. Используйте для их очистки только влажную, а затем сухую ткань.
- ▲ Меняйте насадку для зубной щетки не реже одного раза в 3 месяца.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Стандартная насадка средней жесткости
2. Приводной вал
3. Кнопка включения/выключения
4. Кнопка переключения режима работы
5. Индикатор режима работы «Очистка» **CLEAN**
6. Индикатор режима работы «Бережная очистка» **SOFT**
7. Индикатор режима работы «Отбеливание» **WHITEN**
8. Индикатор режима работы «Массаж» **MASSAGE**
9. Индикатор заряда аккумулятора 

- горит зеленым цветом в процессе работы прибора;
- горит красным цветом, когда аккумулятор заряжается;
- мигает, а затем гаснет при попытке включения прибора, когда аккумулятор разряжен;
- не горит, когда прибор находится на зарядной станции, а аккумулятор полностью заряжен


10. Корпус зубной щетки
11. Зарядный стакан
12. Зарядная станция
13. Дорожный футляр
14. Электрошнур

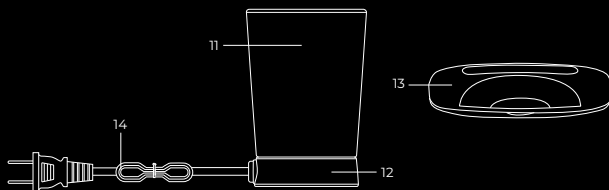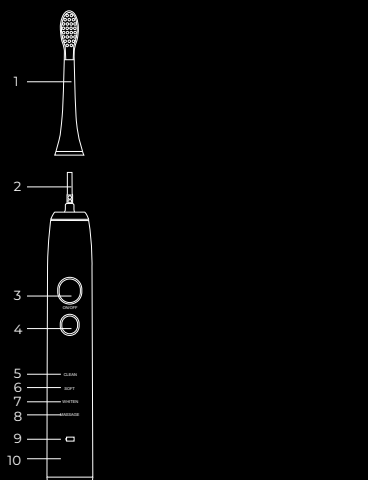

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка прибора

1. Подключите электрошнур к электросети. После этого поставьте на станцию зарядки стакан (11), а в стакан поместите корпус зубной щетки ровно или под углом. Индикатор заряда аккумулятора  загорится красным цветом.
2. Когда аккумулятор зубной щетки зарядится, индикатор  погаснет. Устройство готово к работе.

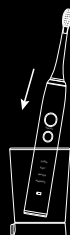

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Прикрепите насадку, надев ее на приводной вал до упора.

i Между насадкой и зубной щеткой останется небольшая щель, это не является неисправностью.

2. Смочите щетину водой и нанесите на нее средство для чистки зубов.

3. Нажмите на кнопку включения/выключения (3), чтобы включить устройство. Устройство включится на том же режиме работы, который Вы выбрали при прошлом использовании, индикатор выбранного режима будет гореть белым цветом, индикатор заряда аккумулятора будет гореть зеленым цветом.

4. При необходимости выберите другой режим работы нажатием на кнопку (4) (см. «Таблица режимов работы»). Индикатор выбранного режима будет гореть.

5. Поместите насадку в ротовую полость. Перемещайте насадку вдоль зубного ряда. Для удобства поделите ротовую полость на 4 участка и уделяйте каждому участку 30 секунд. Держите зубную щетку под углом 45° для тщательной очистки.

i Каждые 30 сек. устройство будет прерывать работу на 1 сек. Это сигнал о том, что необходимо сменить участок очистки.

6. Зубная щетка автоматически выключится через 2 мин., или Вы можете выключить ее, нажав на кнопку (3).

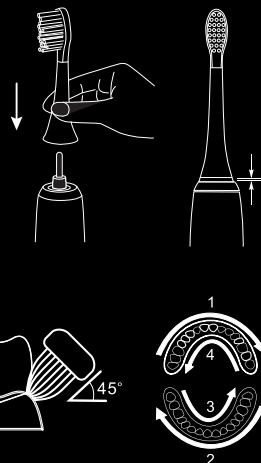


Таблица режимов работы

Режим работы	Рекомендации
«Очистка» CLEAN	используется для ежедневной чистки зубов
«Бережная чистка» SOFT	мягкий режим для чистки чувствительных зубов
«Отбеливание» WHITEN	мощный режим для эффективного удаления зубного налета. Рекомендуется людям, часто употребляющим кофе и черный чай
«Массаж» MASSAGE	режим работы с пульсацией. Подходит для глубокой чистки зубов и массажа десен

Функция памяти

Зубная щетка оснащена функцией памяти. Она запоминает последний режим работы, который был выбран, и автоматически запускает его при последующем включении.

УХОД И ОЧИСТКА


1. После использования зубной щетки переверните ее насадкой вниз и промойте насадку под проточной водой или снимите насадку с приводного вала и промойте отдельно.

2. Протрите корпус зубной щетки сначала влажной, а затем сухой тканью. Протрите приводной вал сухой тканью.

3. Промойте зарядный стакан под проточной водой.

i Перед тем как устанавливать зарядный стакан обратно на зарядную станцию, протрите его сухой тканью или высушите на воздухе. Не ставьте мокрый стакан на зарядную станцию!

4. Высушите насадку для зубной щетки на воздухе или протрите ее сухой тканью.

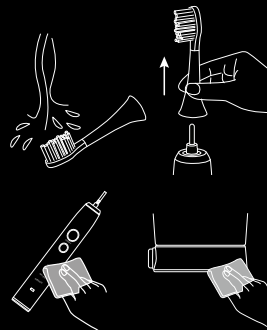

i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)