


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Время полной зарядки аккумулятора – около 16 ч.
- ▲ Устройство является предметом личной гигиены, поэтому рекомендуется не передавать другому человеку индивидуальную насадку.
- ▲ Никогда не используйте для очистки прибора агрессивные средства и воду горячее 50 °С.
- ▲ Не промывайте корпус зубной щетки и зарядную станцию под водой. Используйте для их очистки только влажную, а затем сухую ткань.
- ▲ Меняйте насадку для зубной щетки не реже одного раза в 3 месяца.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


1. Насадка для зубной щетки
2. Приводной вал
3. Корпус зубной щетки
4. Кнопка включения / выключения / смены режима работы
5. Индикатор режима «Очистка» 
6. Индикатор режима «Отбеливание» 
7. Индикатор режима «Полировка» 
8. Индикатор режима «Массаж» 
9. Индикатор режима «Бережная чистка» 
10. Индикатор заряда аккумулятора :
 - плавно мигает зеленым цветом в процессе зарядки аккумулятора;
 - непрерывно горит зеленым цветом в процессе работы прибора;
 - мигает, а затем гаснет, когда прибор разряжен
 - не горит, когда прибор находится на зарядной станции, а аккумулятор полностью заряжен
11. Зарядная станция
12. Прорезиненные ножки
13. Кабель USB Type-A

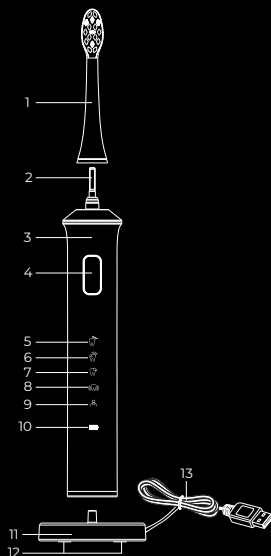

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка прибора

1. Подсоедините кабель USB к USB-разъему источника питания. В качестве источника питания Вы можете использовать включенный компьютер или сетевой адаптер (в комплект не входит), подсоединенный к электророзетке. Поставьте на зарядную станцию (11) корпус зубной щетки. Индикатор заряда аккумулятора (10) плавно замигает зеленым цветом.
2. Когда аккумулятор зубной щетки зарядится, индикатор (10) погаснет. Устройство готово к работе.

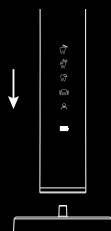

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Прикрепите насадку, надев ее на приводной вал до упора.
- 1 *Между насадкой и зубной щеткой останется небольшая щель, это не является неисправностью.*
2. Смочите щетину водой и нанесите на нее средство для чистки зубов.
3. Нажмите на кнопку включения / выключения / смены режима работы (4), чтобы включить устройство. Устройство включится на том же режиме работы, который Вы выбрали ранее, индикатор выбранного режима будет гореть.
4. При необходимости продолжайте нажимать на кнопку (4), чтобы выбрать другой режим работы (см. «Таблица режимов работы»). Индикатор выбранного режима будет гореть.
5. Поместите насадку в ротовую полость.
6. Перемещайте насадку вдоль зубного ряда. Для удобства поделите ротовую полость на 4 участка и уделяйте каждому участку 30 секунд. Держите зубную щетку под углом 45° для тщательной очистки.
7. Зубная щетка автоматически выключится через 2 мин., или Вы можете выключить ее, нажав на кнопку (4).

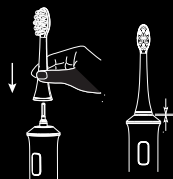


Таблица режимов работы

Режим работы	Рекомендации
«Очистка»	используется для ежедневной чистки зубов
«Отбеливание»	мощный режим для эффективного удаления зубного налета. Рекомендуется людям, часто употребляющим черный кофе и чай
«Полировка»	используется как дополнение к основной чистке для максимальной гладкости зубов
«Массаж»	режим работы с пульсацией для глубокой чистки зубов и массажа десен
«Бережная чистка»	используется для чистки чувствительных зубов

Функция памяти

Зубная щетка оснащена функцией памяти. Она запоминает последний режим работы, который был выбран, и автоматически запускает его при последующем включении.

УХОД И ОЧИСТКА

1. После использования зубной щетки переверните ее насадкой вниз и промойте насадку под проточной водой или снимите насадку с приводного вала и промойте отдельно.
2. Протрите корпус зубной щетки сначала влажной, а затем сухой тканью. Протрите приводной вал сухой тканью.
3. Высушите насадку для зубной щетки на воздухе или протрите ее сухой тканью.

1 *Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах GARLYN по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)*