


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Перед зарядкой убедитесь, что прибор абсолютно сухой.
- ▲ Запрещается заряжать прибор вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.).
- ▲ Время полной зарядки аккумулятора – около 16 ч.
- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ Не используйте устройство без насадок.
- ▲ Перед использованием прибора удалите все съемные приспособления из ротовой полости.
- ▲ Перед использованием прибора проконсультируйтесь со стоматологом.
- ▲ Если Вы наблюдаете сильную кровоточивость десен после двух недель использования щетки, проконсультируйтесь с врачом.
- ▲ Устройство является предметом личной гигиены, поэтому рекомендуется не передавать другому человеку индивидуальную насадку.
- ▲ Не промывайте корпус зубной щетки и зарядную станцию под водой. Используйте для их очистки только влажную, а затем сухую ткань.
- ▲ Меняйте насадку для зубной щетки не реже одного раза в 3 месяца.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


1. Стандартная насадка средней жесткости
2. Приводной вал
3. Корпус зубной щетки
4. Кнопка включения / выключения / переключения режима
5. Индикатор режима работы «Очистка» **CLEAN**
6. Индикатор режима работы «Бережная очистка» **SOFT**
7. Индикатор режима работы «Массаж» **MASSAGE**
8. Индикатор заряда аккумулятора 
 - плавно мигает красным цветом, когда аккумулятор заряжается;
 - 5 раз мигает, а затем гаснет при попытке включения прибора, когда аккумулятор разряжен;
 - не горит, когда прибор находится на зарядной станции, а аккумулятор полностью заряжен
9. Зарядная станция
10. Электрошнур
11. Дорожный футляр

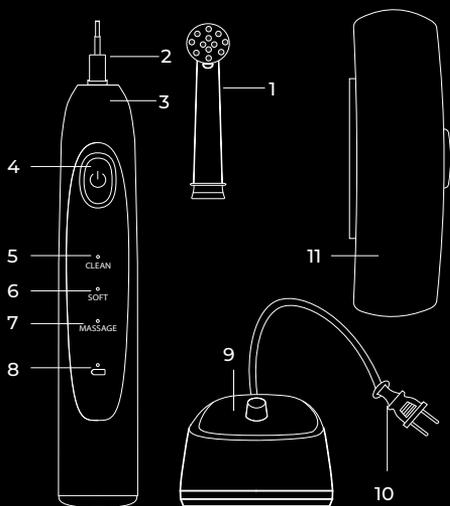

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Зарядка прибора

1. Подключите электрошнур к электросети. После этого поставьте на зарядную станцию (9) корпус зубной щетки. Индикатор заряда аккумулятора  плавно замигает красным цветом.
2. Когда аккумулятор зубной щетки зарядится, индикатор  погаснет. Устройство готово к работе.

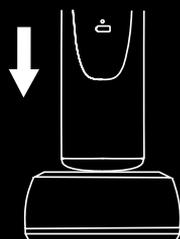

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Прикрепите насадку, надев ее на приводной вал до упора. Смочите щетину водой и нанесите на нее средство для чистки зубов.
2. Нажмите на кнопку включения / выключения / переключения режима (4), чтобы включить устройство. Устройство включится на том же режиме работы, который Вы выбрали при прошлом использовании, индикатор выбранного режима загорится.

i Зубная щетка завибрирует, что может привести к разбрызгиванию средства для чистки зубов, будьте осторожны.

3. Продолжайте нажимать на кнопку (4), чтобы выбрать другой режим работы (см. «Таблица режимов работы»). Индикатор выбранного режима будет гореть.

i Возможность сменить режим одним нажатием на кнопку включения / выключения / переключения режима (4) будет доступна около 5 сек. После этого при нажатии на кнопку (4) устройство выключится.

4. Поместите насадку в ротовую полость. Перемещайте насадку вдоль зубного ряда. Для удобства поделите ротовую полость на 4 участка и уделяйте каждому участку 30 секунд. Держите зубную щетку под углом 45° для тщательной очистки.

i Каждые 30 сек. устройство будет прерывать работу на 1 сек. Это сигнал о том, что необходимо сменить участок очистки.

5. Зубная щетка автоматически выключится через 2 мин., или Вы можете выключить ее вручную, нажав на кнопку (4).

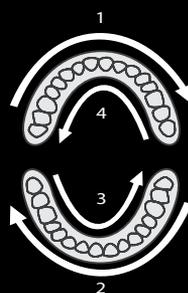
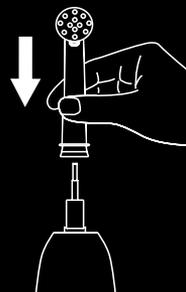


Таблица режимов работы

Режим работы	Параметры режима
«Очистка» CLEAN	используется для ежедневной чистки зубов
«Бережная чистка» SOFT	мягкий режим для чистки чувствительных зубов
«Массаж» MASSAGE	режим работы с пульсацией. Подходит для глубокой чистки зубов и массажа десен

Функция памяти

Зубная щетка оснащена функцией памяти. Она запоминает последний режим работы, который был выбран, и автоматически запускает его при последующем включении.

УХОД И ОЧИСТКА

1. После завершения использования зубной щетки снимите насадку с приводного вала и промойте под водой снаружи и изнутри.
2. Наклоните корпус зубной щетки и промойте приводной вал под струей воды, затем протрите его сухой тканью.

i Не промывайте корпус зубной щетки под водой!

3. Протрите корпус зубной щетки сначала влажной, а затем сухой тканью.

4. Высушите насадку на воздухе или протрите ее сухой тканью.



i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)